

IKA Polska E. Roszak Sp. K.

Instrukcja użytkowania: bezpudrowe rękawice nitrylowe

Nazwa: Master Rękawice Nitrylowe PF

Ref/Rozmiar: S400/XS, S401/S, S402/M, S403/L, S404/XL

Kod Basic UDI-DI: 590773291RDNPF LT

Opis produktu:

Rękawice diagnostyczne i ochronne nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, do jednorazowego użycia.

Cechy produktu:

Surowiec:	nitryl
Kolor:	niebieski
Środek pudrujący:	brak
Powierzchnia:	tekstura na końcach palców
AQL:	1.5
Mankiet:	równomiernie rolowany
Kształt:	pasujące na lewą i prawą dłoń
Ilość w opakowaniu jednostkowym:	100 sztuk
Dostępne rozmiary:	XS (5-6); S (6-7); M (7-8); L (8-9); XL (9-10)
Okres ważności:	zgodnie z datą ważności na opakowaniu

Zastosowanie:

Pielęgniarstwo; Diagnostyka medyczna; Stomatologia; Weterynaria; Laboratoria badawcze; Centralna sterylizatornia; Farmacja; Przemysł spożywczy; Gastronomia; Catering; Kosmetyka; Fryzjerstwo, Przemysł chemii gospodarczej-nieagresywnej; Prace domowe; Prace porządkowe

Rękawice diagnostyczne przeznaczone do przeprowadzania badań lekarskich, opieki pielęgniarskiej, czynności terapeutycznych i innych czynności w środowisku medycznym, mające chronić zarówno pacjenta, personel medyczny oraz użytkowników przed zakażeniem i zanieczyszczeniem.

Klasyfikacja i normy prawne:

Rękawice zaklasyfikowane jako wyrób medyczny – klasa I zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 5 kwietnia 2017r. [MDR] Zgodność z normami: EN 15223 -1; EN 1041; EN ISO 14971; EN ISO 13485; EN ISO 10993-1;5,10; EN 455 -1;2;3;4.

Rękawice zaklasyfikowane jako Środek Ochrony Indywidualnej–kategorii I zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. [PPE] Zgodność z normami: EN 420:2003+A1:2009

Kontakt z żywnością:

Rękawice dopuszczone do kontaktu z żywnością. Są zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 10/2011, Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 oraz z Rozporządzeniem (WE) nr 2023/2006 o Dobrej Praktyce Produkcyjnej. Nie każdy rodzaj rękawic może być używany w kontakcie z każdym rodzajem żywności. Niektóre rękawice mogą uwalniać szkodliwe substancje przechodzące bezpośrednio do żywności. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z IKA Polska E. Roszak Sp. K.

Warunki transportu i przechowywania:

- chronić przed światłem słonecznym, fluorescencyjnym i ozonem

- przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze 10–30°C
- zalecana wilgotność względna pomieszczenia, w którym są przechowywane rękawice to 60±20%
- przechowywać rękawice w odległości nie mniejszej niż 1 m od urządzeń grzewczych i źródeł ognia
- nie przechowywać w bezpośrednim sąsiedztwie rozpuszczalników, olejów, paliw, smarów
- opakowania kartonowe rękawic przystosowane są do transportu i składowania

Użytkowanie, środki ostrożności:

- przed użyciem należy sprawdzić czy rękawice nie posiadają defektów
- rękawice jednorazowe- należy używać minimum 1 pary rękawic do jednego pacjenta i jednej procedury medycznej
- w trakcie użytkowania rękawice należy natychmiast wymienić na nowe, gdy są pęknięte, rozdarte lub przebite
- podczas użytkowania rękawic należy stosować łagodne środki myjące i dezynfekcyjne, które nie drażnią skóry rąk
- przed nałożeniem rękawic, zalecane jest dokładne osuszanie skóry rąk
- po każdorazowym zdjęciu rękawic zalecane jest dokładne umycie rąk, osuszenie i zastosowanie kremu pielęgnacyjnego
- należy wszystkie substancje chemiczne utrzymywać z dala od skóry, nawet gdy nie są one niebezpieczne
- w przypadku, gdy substancja chemiczna przedostanie się do skóry, należy ją natychmiast zmyć dużą ilością wody z dodatkiem mydła
- unikać rękawic zabrudzonych od środka – mogą one wywoływać podrażnienia prowadzące do zapalenia skóry lub poważniejszych urazów
- nie używać rękawic, gdy istnieje ryzyko pochwylenia przez ruchome części maszyn
- rękawic nie należy używać w styczności z otwartym ogniem oraz do ochrony przed wszelkiego ostrymi narzędziami
- rękawice nie są przeznaczone do spawania, do ochrony przed porażeniem elektrycznym, promieniowaniem jonizującym, ani przed działaniem zimnych i gorących przedmiotów
- nie stosować po upływie terminu ważności
- po użyciu wyrób zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami

Składniki niebezpieczne:

Niektóre rękawice zawierają składniki, o których wiadomo, iż mogą być przyczyną alergii u osób na nie uczulonych, u których mogą rozwijać się kontaktowe podrażnienia i/lub reakcja alergiczna . W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej, należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.

Uwagi końcowe:

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie służą do pomocy przy wyborze przez użytkownika właściwego środka ochrony osobistej.

Wyniki badań i testów laboratoryjnych mają na celu ułatwienie wyboru, jednak nie symulują rzeczywistych warunków eksploatacji.

Na użytkownika spoczywa odpowiedzialność ostatecznej decyzji o zastosowaniu danego środka ochrony indywidualnej do zamierzonego działania.


Produkt częściowo rozdarty lub uszkodzony należy bezzwłocznie wycofać z eksploatacji, ponieważ nie zapewnia deklarowanej przez wytwórcę ochrony, a jego dalsze stosowanie może być przyczyną dodatkowych zagrożeń.

Rękawice nie zabezpieczają przed ryzykami nie wymienionymi w niniejszym dokumencie.


Producent:

IKA Polska E. Roszak Sp. K. ul. Forteczna 19, 61-362 Poznań, www.ika.pl

INSTRUKCJA OBRAZKOWA ZAKŁADANIA RĘKAWIC

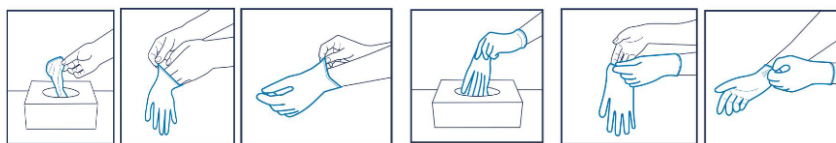

INSTRUKCJA OBRAZKOWA ZDEJMOWANIA RĘKAWIC

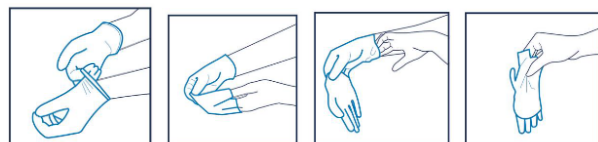

WYJAŚNIENIE PIKTOGRAMÓW UŻYTYCH NA OPAKOWANIU

	produkt jednorazowego użytku		opakowanie nadaje się do recyklingu
	produkt niejałowy		opakowanie można traktować jako odpad komunalny
	wyrób medyczny		wyrób oznakowany znakiem CE zgodnie z MDR
NITRIL	rękawice wykonane z nitrilu	www.medasept.com	instrukcja użytkowania do pobrania ze strony www.ika.pl . Do otwarcia wymagany jest darmowy program do pobrania ze strony https://get.adobe.com/pl/rader/
	chronić przed światłem słonecznym i fluorescencyjnym	Producent: IKA Polska Sp. z o.o. Sp. k. ul. Forteczna 19, 61-362 Poznań info@ika.pl , www.ika.pl	dane producenta
	chronić przed wilgocią, przechowywać w suchym miejscu	100 by weight	ilość sztuk według wagi
	przechowywać w temperaturze 10 - 30°C		jakości rękawic nie gwarantuje się w przypadku uszkodzenia opakowania
	nr partii nadawany przez wytwórcę		data produkcji
	data ważności		rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością